

联系我们

服务热线:400-885-9880

奥佳华中国官网:www.ogawa.com.cn

奥佳华品牌营销有限公司

地址:厦门市思明区前埔路168号三楼01单元(西侧)


邮编:361008



MasterDrive PLUS

御手温感大师椅

每一块脊椎 都会感谢你

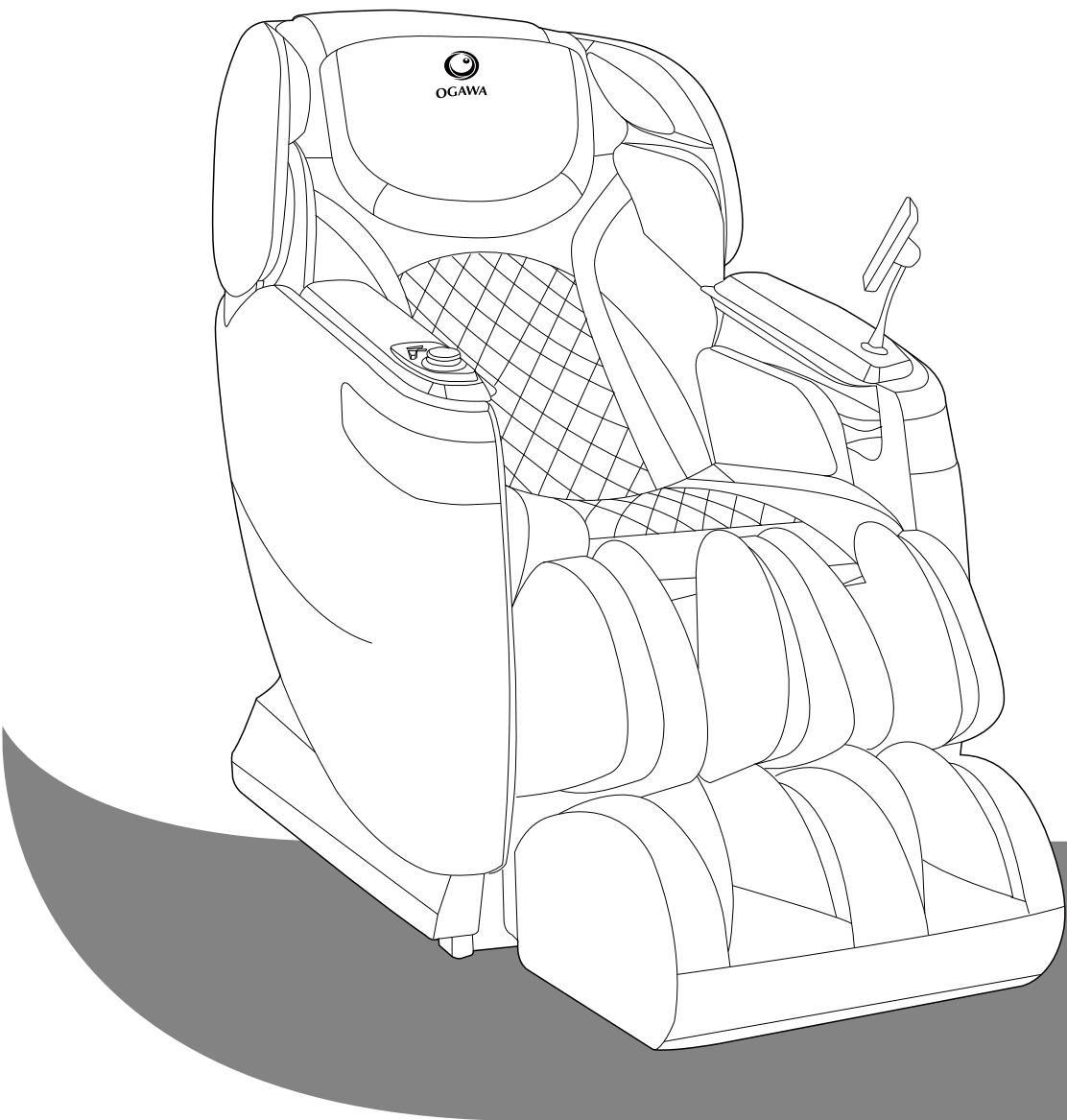

奥佳华天猫旗舰店



奥佳华京东旗舰店



奥佳华官方微信二维码

User Manual
OG-7598 Plus 使用手册

目录



融入生活 享受健康

User Manual
All information is correct at the time of print

使用前

● 重要的安全事项	SC1
● 接地说明	SC5
● 产品结构	SC6
● 设置按摩椅	SC8
● 组装	SC9
● 使用前	SC10

使用方法

● 快捷操作	SC14
● 操作说明	SC15
● 按摩结束	SC25

维护

● 清洗及保养	SC27
---------	------

Q&A/重要事项



● Q&A	SC28
● 故障检修	SC29
● 规格	SC31
● 联系我们	SC32

重要的安全事项

必须遵守



下文列举的是使用中为防止人身、财产损害而必须严格遵守的安全事项。




■ 所有安全事项将根据因错误使用而导致危害或损害的程度，予以说明。
























 警告	可能造成重伤或死亡后果的事项内容。
 注意	可能造成轻伤或财产损害的事项内容。




















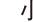


■ 请注意各安全事项前的符号。（下文为符号范例）

 绝对禁止事项。	 必须执行事项。
---	---

 警告	
 必须遵守	<ul style="list-style-type: none">● 正在接受治疗或有下列症状的人，在使用本机前，应咨询医师。<ul style="list-style-type: none">(1)佩戴起搏器或其他易受电子干扰的体内植入型电子医疗器械的人(2)恶性肿瘤病人(3)心脏病人(4)被查证丧失辨别温度能力的人(5)孕妇或刚完成分娩的人(6)因糖尿病等高度末梢循环障碍引起知觉障碍的人(7)骨质疏松症患者、脊椎骨折病人、患有扭伤或肌肉拉伤等急性疼痛性疾病的(8)按摩部位受伤的人(9)体温 38℃ 以上(有发热症状)的人 (例：急性炎症症状[如倦怠感、寒颤、血压变动等]强烈时、身体虚弱时)(10)必须静养或身体显著不适的人(11)脊椎异常或脊椎弯曲的人(12)患有椎间盘突出症的人(13)除上述之外，身体感觉特别不适的人 <p>否则恐发生事故或造成身体不适。</p>
	<ul style="list-style-type: none">● 使用中感到身体异常，请立即停止使用，并咨询医师。 <p>否则恐发生事故或造成身体不适。</p>
	<ul style="list-style-type: none">● 按摩中或移动靠背、小腿・脚部按摩时，请事先确认本机周围（本机后面、下面、前面和侧面）没有人或宠物。● 使用前请务必确认靠背和后盖之间无异物或者宠物。 <p>否则恐发生事故或造成身体不适。</p>
	<ul style="list-style-type: none">● 在使用本机前，一定要掀开靠垫，以检查靠背覆盖在按摩轮活动范围上的面料是否破损或者其他部位的面料是否破损。 (无论发现多么细小的破损，都请立刻停止使用，拔掉电源插头，并将本机报修。) <p>在面料破损的情况下使用本机，可能引发受伤或触电的危险。</p>
	<ul style="list-style-type: none">● 使用最初，请选择轻度按摩的“清晨唤醒”程序。● 每次按摩请控制在 30 分钟内。● 请将对身体同一部位的按摩控制在 5 分钟内。 <p>否则可能出现负面效果并造成伤害。</p>
	<ul style="list-style-type: none">● 每次使用完毕，应将电源开关滑到“○”（关闭）位置，拔掉电源插头。 <p>否则可能因儿童顽皮引发事故或造成伤害。</p>
	<ul style="list-style-type: none">● 请严格遵守插座和配线器具的使用规定。● 请使用 220V~,50Hz 交流电。 (请勿在国外使用本品，或擅自连接变压器。) <p>否则可能引发触电、机体故障或因过热导致火灾。</p>
	<ul style="list-style-type: none">● 请务必将电源插头插到底，使其确实地插入插座中。 <p>否则可能引发触电或因过热导致火灾。</p>

 警告	
 必须遵守	<ul style="list-style-type: none">● 请定期清理电源插头上的灰尘等脏污。 否则可能因湿气等原因引发绝缘不良，从而导致火灾。 (请用干燥的抹布擦拭电源插头。)
	<ul style="list-style-type: none">● 发生异常、故障时，立即停止使用，拔掉电源插头。（否则可能冒烟、起火、触电） <异常、故障事例><ul style="list-style-type: none">•接通电源开关后可能不动作•移动电源线，有时通电有时不通电•运行中发出焦臭味、异常声响•按摩椅变形或者异常发热→ 请立即委托授权服务中心检查和修理。
 禁止	<ul style="list-style-type: none">● 请勿将靠垫伸入靠背和后盖之间。 否则可能会导致机体故障。
	<ul style="list-style-type: none">● 请握住边框进行本机搬运。 否则可能会导致机体故障或人身伤害。
	<ul style="list-style-type: none">● 下列人员请勿使用本机。 被医生禁止按摩的人（例：患有血栓症、重度动脉瘤、急性静脉瘤、各种皮肤炎或皮肤感染症〔包括患皮下组织炎症〕的人等） 否则可能会导致病情恶化。
	<ul style="list-style-type: none">● 下列人员请勿使用腰部按摩。<ul style="list-style-type: none">•患有急性腰痛、椎间盘突出症、腰椎移位症的人•罹患变形性髋关节症等髋关节不适的人否则可能会导致病情恶化。
	<ul style="list-style-type: none">● 在使用中请勿将手、手臂、脚塞入靠背覆盖在按摩轮活动范围上的面料。● 儿童禁止使用本机。此外，请勿让儿童在本机上玩耍，或者爬到小腿・脚部按摩部、座面、靠背或扶手上。● 请勿攀爬靠背或者扶手。● 请勿倚靠或坐在靠背上。● 请勿将头伸入靠背和后盖之间的活动区域。● 请勿让不能表达自己意思的人或没有能力操作本机的人使用本机。● 按摩颈部时，请注意按摩轮的动向，请勿按摩前颈，请避免过重地按摩颈部。 否则可能会引起事故或造成伤害。
	<ul style="list-style-type: none">● 请勿损坏电源线及电源插头。 (请避免此类行为：损伤、加工、强行弯曲、扭转、拉长电源线及电源插头，或将电源线及电源插头靠近发热器，或在电源线及电源插头上系重物、或任意捆绑。) <p>使用破损的电源线或电源插头，可能引起触电、短路或引发火灾。请到购买本品的商店或指定的维修中心咨询修理电源线或电源插头的方法。</p>
	<ul style="list-style-type: none">● 使用“温热”按摩轮时，不要让按摩轮长时间接触同一位置。● 请勿长时间使用“膝盖温热”按摩。 可能出现低温烫伤*。 *即使温度相对较低（40℃～60℃），长时间接触皮肤的同一部位没有发热、疼痛等自觉症状，也可能导致低温烫伤。
	<ul style="list-style-type: none">● 请勿损膝盖部温热（加热器）。<ul style="list-style-type: none">•不要将别针、针扎进本机。•不要用刀具损伤。损伤内部加热器可能导致火灾或者触电事故。
	<ul style="list-style-type: none">● 请勿用沾湿的手插、拔电源插头。 否则可能导致触电事故。
	<ul style="list-style-type: none">● 请勿擅自改造本机。请勿自行分解或修理本机。 否则可能导致起火、异常动作、人身伤害。

<div><div></div><div>警告</div></div>	
<div><div></div><div>必须遵守</div></div>	<div><div></div><div>● 下列人员即使目前身体健康，也请咨询医师后再使用本机。 （1）因年龄增长而导致肌肉萎缩的人或身体纤瘦的人 （2）因骨头或内脏问题而感觉腰痛的人 （3）容易扭伤或容易瘀伤的人 （4）晕车、晕船或乘坐其它交通工具时，反应异常激烈的人 （5）过去曾被施予心脏手术或其它内脏手术的人 否则可能有损自身健康。</div></div>
	<div><div></div><div>● 就坐前，请先确认本机各个部件之间没有异物。 （确认后盖、靠背、座面、小腿・脚部按摩部、靠垫内侧没有夹杂异物。） 否则可能因手、脚或其它物件被本机夹住，而引发事故、造成伤害或机体故障。</div></div>
	<div><div></div><div>● 头部佩戴任何硬质饰物（如发卡等）时请勿使用本机。</div><div></div><div>● 当裤子口袋内部有硬物时（如手机、钥匙等），将其取出，然后按摩。</div><div></div><div>● 按摩手、手臂时，取下手表、指甲套、戒指等。 否则可能导致伤害。</div></div>
	<div><div></div><div>● 就座前，确认按摩轮处在收纳位置。</div><div></div><div>● 按摩途中若想离开座位，必须先停止按摩椅运作，再离开座位。 否则可能引发事故或造成伤害。</div></div>
	<div><div></div><div>● 请勿扯电源线试图拔出电源插头，一定要握住插头本身将其拔出。 否则可能引发触电或短路。</div></div>
	<div><div></div><div>● 移动本机前，必须把小腿・脚部按摩部的角度调节回最初位置。 否则可能造成伤害。</div></div>
	<div><div></div><div>● 如果使用滑轮移动本机，在地板上垫上垫子等。 否则可能在地板上留下伤痕。</div></div>
	<div><div></div><div>● 请勿让儿童使用遥控器托架的固定螺丝。 否则可能因儿童误食或顽皮引发事故或造成伤害。</div></div>
	<div><div></div><div>● 使用滑轮移动本机前，须先清空周围障碍物。抬起小腿・腿部按摩部座面到略低于腰的位置，慢慢移动。 否则可能因机身翻倒引发事故或造成伤害。</div></div>
	<div><div></div><div>● 须将本机放置在水平面上使用。 否则可能因机身翻倒引发事故。</div></div>
	<div><div></div><div>● 因使用本产品而产生出疹、红肿、发痒等症状时，请立即停止使用，并咨询医师。 否则可能引发事故或导致身体不适。</div></div>
	<div><div></div><div>● 闲置一段时间后使用本品，请先重新阅读一遍产品使用说明书，并确认机体运作正常后，再开始使用。 否则可能引发事故或造成伤害。</div></div>
<div><div></div><div>禁止</div></div>	<div><div></div><div>● 请勿和其它器械同时使用。 否则可能造成事故或引起身体不适。</div></div>
	<div><div></div><div>● 请勿将头部、腹部或皮肤紧贴按摩轮。此外，请勿将手或脚伸入按摩轮之间。</div><div></div><div>● 请勿将膝盖夹在小腿和脚部按摩部之间。</div><div></div><div>● 勿在使用本机时入睡。此外，饮酒后请勿使用本机。</div><div></div><div>● 当鼓起的座面气囊里的空气没有被排放完时，不要站在座面上，或者跳上去，或者在上面放东西。 否则可能导致事故、伤害。</div></div>

<div><div></div><div>警告</div></div>	
<div><div></div><div>禁止</div></div>	<div><div></div><div>● 请勿将手或脚伸入本机与小腿・脚部按摩部之间。</div><div></div><div>● 请勿将手・手臂或头伸入小腿・脚部按摩部（腿置台）的缝隙间。 安全起见，结束按摩后，请一定要收纳好小腿・脚部按摩部。</div><div></div><div>● 请勿将手・手臂或头伸入靠背和后盖之间。</div><div></div><div>● 请勿将宠物放在按摩椅上（后盖、靠背、扶手等）。</div><div></div><div>● 按摩中，请勿突然拔出电源插头，或突然关闭电源开关。 否则可能造成伤害。</div></div>
	<div><div></div><div>● 请勿站立或坐在后盖上。 否则可能导致本机翻倒，造成人身伤害。</div></div>
	<div><div></div><div>● 请勿站立或坐在扶手上。 否则可能导致人身伤害。</div></div>
	<div><div></div><div>● 请勿站立或坐在小腿・脚部按摩部及腿置台上。 否则腿置台前部旋转或者本机倾倒可能导致事故、伤害。 小腿・脚部按摩部底部撞到地板时，可能损坏地板。</div></div>
	<div><div></div><div>● 请勿在已安装好的状态下拖动或推动本机。 否则可能损坏地板。</div></div>
	<div><div></div><div>● 请勿在有人入座时移动本机。 否则可能因机身翻倒引发事故或造成伤害。</div></div>
	<div><div></div><div>● 请勿在电热毯等加热设备上使用本机。 否则可能引起火灾。</div></div>
	<div><div></div><div>● 请勿将遥控器放置在座面上。 否则可能损坏本机。</div></div>
<div><div></div><div>禁止湿手触碰</div></div>	<div><div></div><div>● 请勿在浴室或其它潮湿的地方使用本机。 否则可能引发触电或机体故障。</div></div>
<div><div></div><div>禁止沾湿</div></div>	<div><div></div><div>● 请勿将水滴等物质撒在本机或遥控器上。 否则可能引发触电、短路或引起机体故障。</div></div>
<div><div></div><div>拔出电源插头</div></div>	<div><div></div><div>● 清洗及保养本机，必须先从插座上拔出电源插头。 否则可能引发触电或造成伤害。</div></div>
	<div><div></div><div>● 停电时立刻拔出电源插头。 否则可能在恢复供电时导致事故、伤害。</div></div>
	<div><div></div><div>● 不用时，一定要从插座上拔出电源插头。 否则灰尘、湿气可能导致绝缘老化，引发漏电火灾。</div></div>


接地说明

- 本机必须接地。如果本机发生功能故障，可以使用接地来减少触电危险。
- 本机装备了具有设备接地导线和接地插头的电源线。必须将该插头插入已完全依照当地代码和法令进行正确安装和接地的、合适的插座。

⚠ 注意


- 若设备接地导线的连接不当，则会导致触电危险。如果您对本机的接地是否正确存有疑问，请委托专业电工进行检查。即使本机附带的插头与插座不配，也不能对其进行改造。请委托专业电工安装合适的插座。
- 本机具有接地插头。请确认本机连接至具有与插头形状匹配的插座。
- 本机不能使用转接插座。
- 如果电源线损坏，必须使用专用的电源线或从其制造商或维修部买专用组件来更换。
- 本产品具有发热表面，对热不敏感的人使用时必须注意！
- 为了达到最佳的舒适度,4D机芯伸缩在肩部以下不能调到最高档。

产品结构

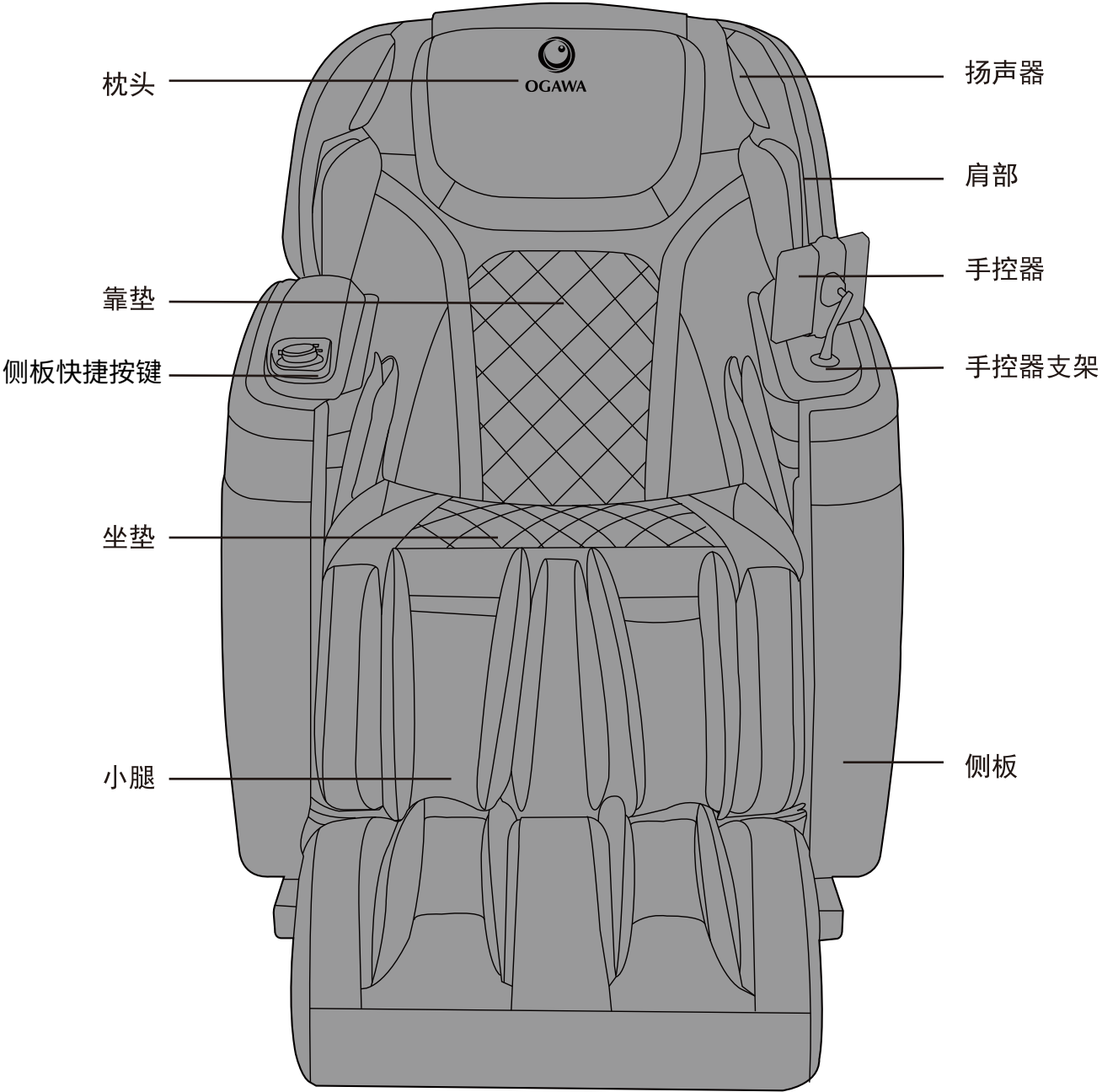

产品结构


气囊按摩位置

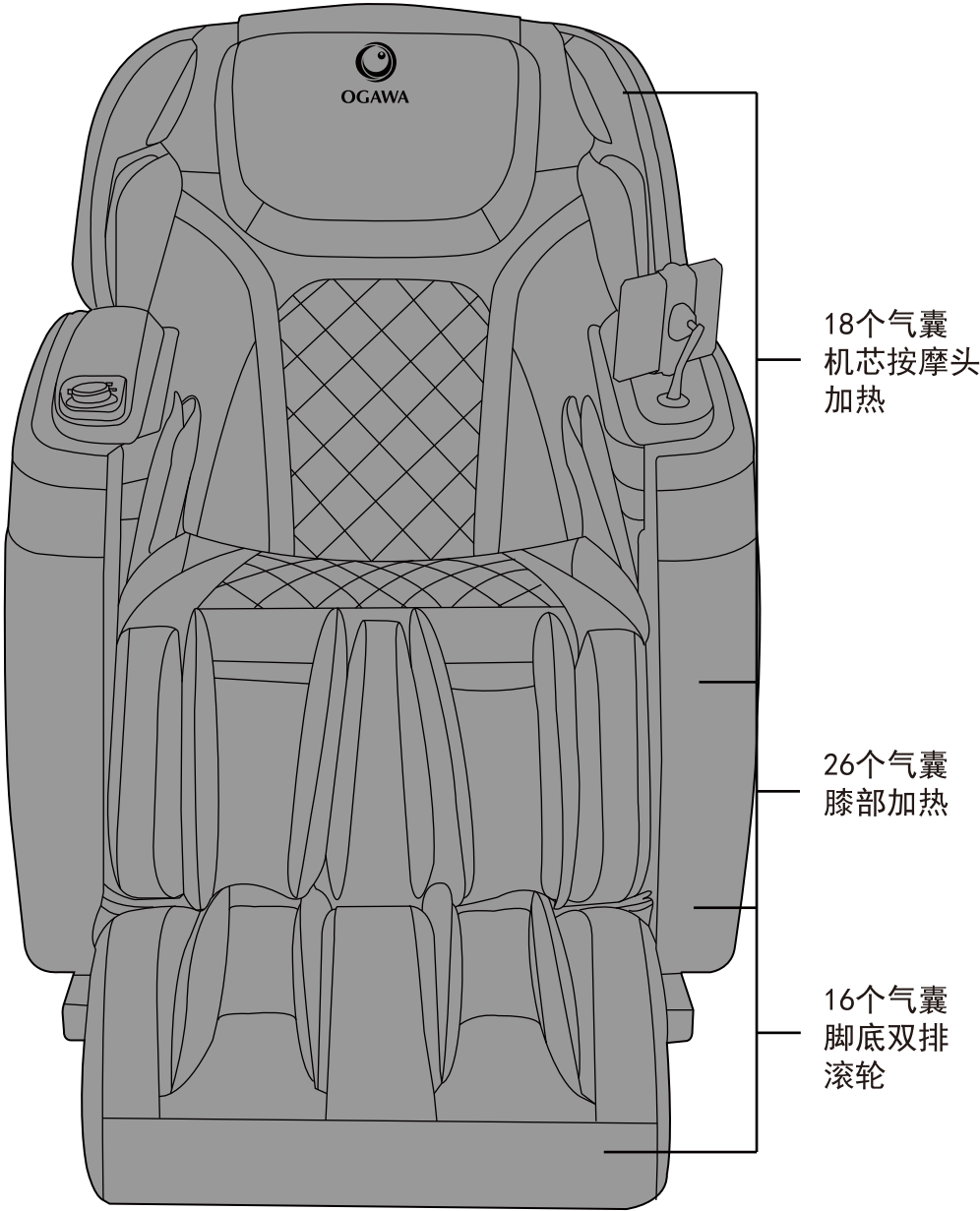

设置按摩椅

1 使用前(安装位置)

- 确保足够空间以便按摩椅可以倾斜。

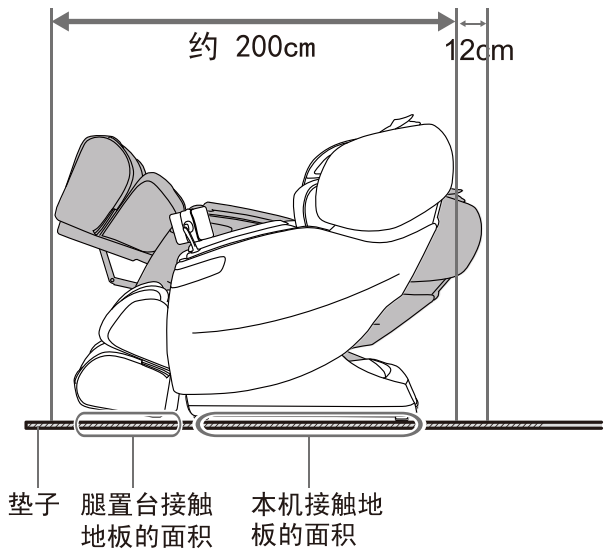

- 请勿将按摩椅暴露于阳光直射或高温环境下(如, 加热设备前), 因为这样可能导致按摩椅合成皮革褪色或硬化。
- 为避免地板损伤, 请在本机下铺上垫子。平铺垫子时, 垫子的大小应足以盖住本机接触地板的范围与腿置台接触地板的范围(至少 200cm X 90cm), 如图所示。
- 安装本机时应靠近电源插座。

2 产品移动说明

方法一: 拖住两边侧板, 然后抬起



- 由于本机较重, 因此搬运时请小心, 以免造成背部拉伤。(本机必须由两人或多人搬运。)

本机重量	约125kg
------	--------

将本机放置在地板上

- 缓慢地放下本机, 小心脚部被压伤。
- 直到机身完全放平前, 请勿放开腿置台。突然松手, 将导致腿置台弹回最初位置。
- 地板可能受损, 因此, 建议在地板上铺上垫子等物品。

⚠ 注意

- 请勿在未安装好的状态下拖动或推动本机。
- 请勿握住窗口边框进行本体搬动。否则可能会导致机体故障或人身伤害。
- 不要在地板上使用滑轮移动。否则可能在地板上留下伤痕。
- 请勿在有人入座时移动本机。否则可能因跌倒导致事故、伤害。
- 移动本机时，不要握持脚部按摩部分。移动在滑动可能导致伤害。


方法二：使用滑块移动本机

⚠ 注意

以右图方式 推动按摩椅，但此方法不适用于木地板推动，否则可能在木地板上留下划痕。

- 1 按下开关键按钮。
- 2 将靠背和小腿返回至其原始位置。将电源开关滑到“0”（关闭）位置，拔下本机插头。

将遥控器和电源线放在座位上。

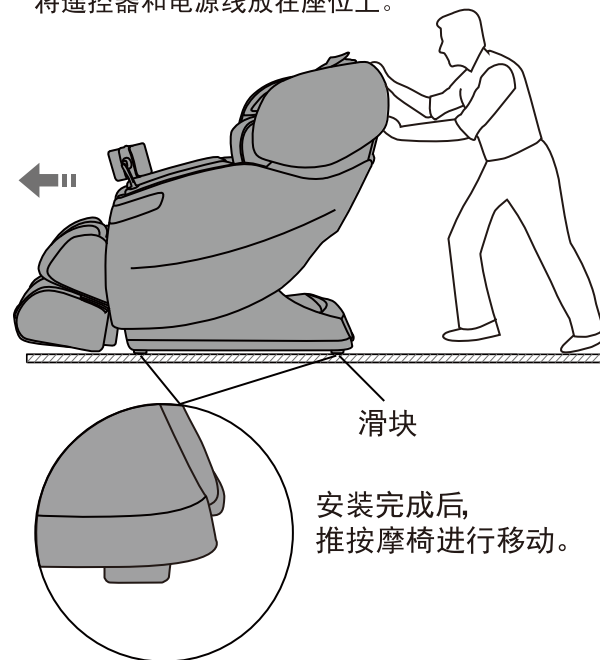


组装

（请翻阅产品安装说明）

使用前


1 检查周围

确定本机周围没有人、宠物及其它物体。

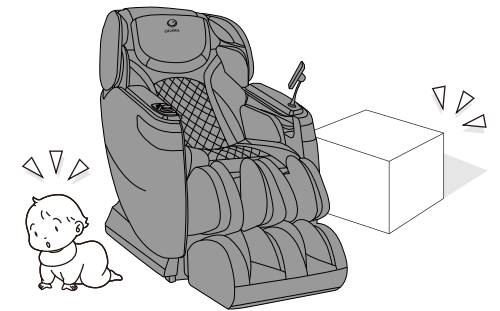

2 卷起靠垫并以拉链固定

卷起靠垫并以拉链固定在本体上。

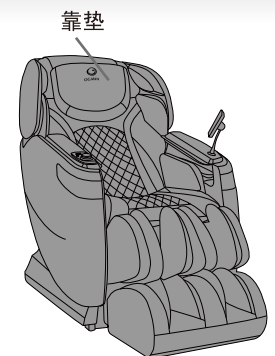


3 确保本机缝隙间没有异物。

小腿、脚部按摩前，确认没有夹住异物

⚠ 注意


- 不要将手、手指、脚、头伸进小腿与座面、扶手的间隙中间
- 就坐前，请先确认本机各个部件之间没有异物。
- 请勿将手、手臂或头伸入靠背与后盖之间。
- 请勿将宠物放在按摩椅上（后盖、靠背、扶手等）。

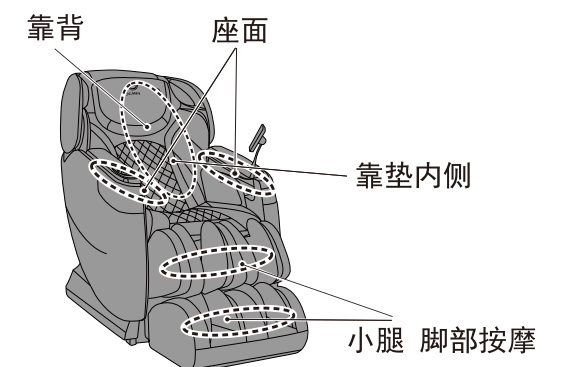

4 检查电源线及电源插头


警告

- 请定期清理电源插头上的灰尘等脏污。
否则可能因湿气等原因引发绝缘不良，从而导致引发火灾。
(请用干燥的抹布擦拭电源插头。)
- 请勿损坏电源线及电源插头。
(请避免此类行为：损伤、加工、强行弯曲、扭转、拉长电源线及电源插头，或将电源线及电源插头靠近发热器，或在电源线及电源插头上系重物、或任意捆绑。)
使用破损的电源线或电源插头，可能引起触电、短路或引发火灾。请到购买本品的商店或指定的维修中心咨询修理电源线或电源插头的方法。

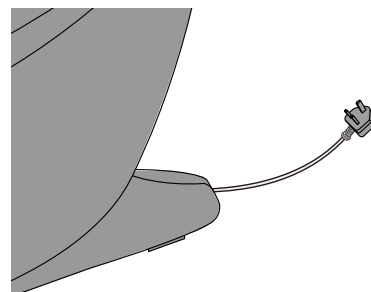

请注意，不要被电源线
绊住脚部等。

务必将接口完全推入设备电源输入
插口。


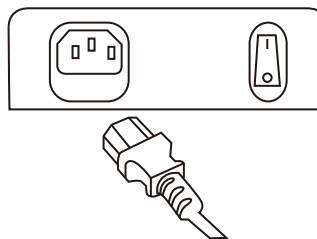


5 打开电源

- 1 将电源插头插入电源插座。
- 2 将电源开关滑到“Ⅰ”(开启)的位置。

警告


- 请务必将电源插头插到底，使其确实地插入插座中。
否则可能引发触电或因过热导致火灾。
- 请严格遵守插座和配线器具的使用规定。
- 请使用 220V~.50Hz 交流电。
(请勿在国外使用本品、或擅自连接变压器。)
否则可能引发触电、机体故障或因过热导致火灾。
- 请勿用沾湿的手插、拔电源插头。

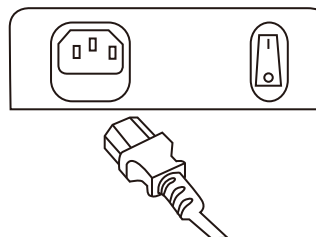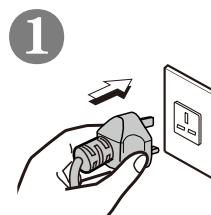

使用前 (续)

6 确认按摩轮处于收纳位置


确认

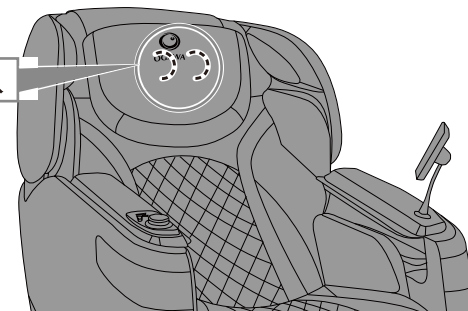

按摩轮不处于收纳位置时，
按下开机键返回收纳位置。

7 确认面料未破损或存在裂缝

确认

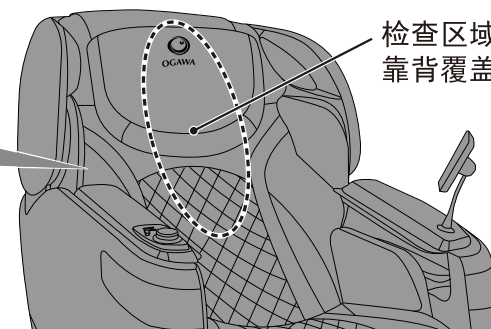


检查区域：
靠背覆盖在按摩轮活动范围上的面料

警告

- 在使用本机前，一定要掀开靠垫，以检查图示区域面料是否破损。其他部分也要确认面料是否破损。
(无论发现多么细小的破损，都请立刻停止使用，拔掉电源插头，并将本机送修。)
在面料破损情况下使用本机，可能引发伤害或触电的危险。


8 根据需要调整椅子

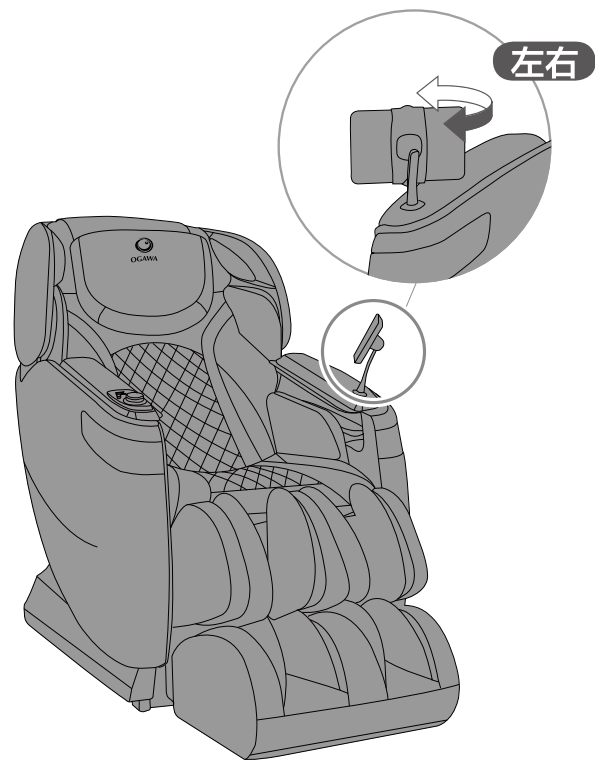

调节遥控器

- 可调节左右方向。

9 根据需要调节脚部按摩部长度

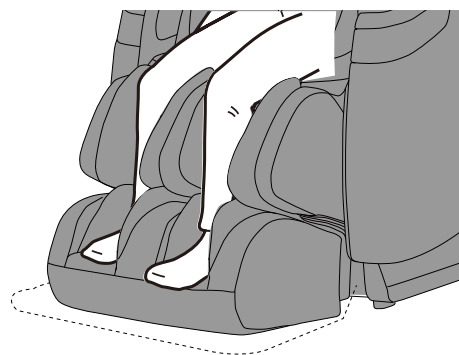


当下小腿自动调整到舒服位置时，
用脚跟踩下底部感应器以便停止调整。

身材高大的人士

- 电动调节脚部按摩部长度，
膝盖就不容易悬空。

快捷操作

右侧板设置快捷按键，具体功能描述如下

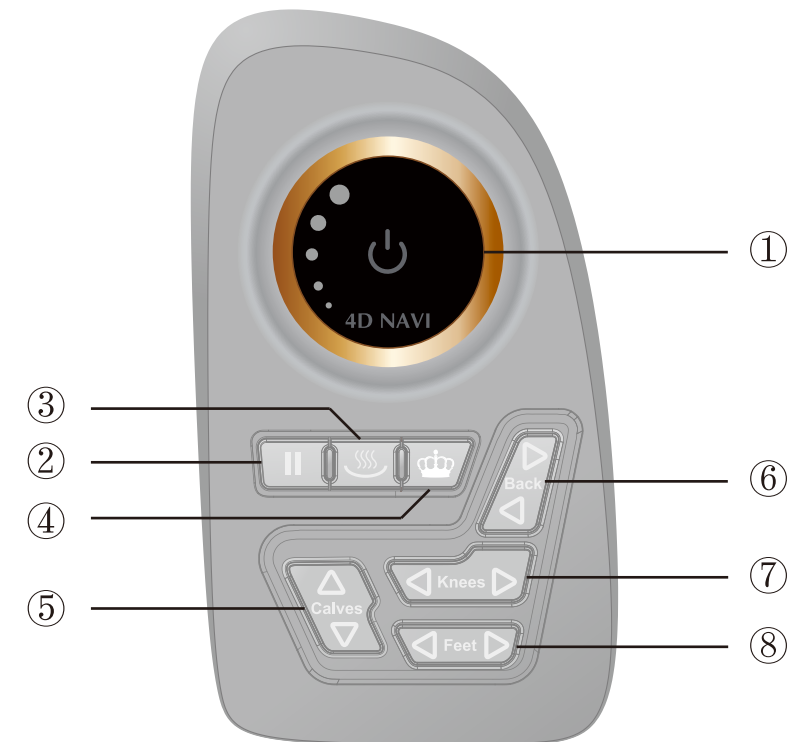

- 待机键、4D大小调节组合按键：
开关功能，关机状态下，长按1秒开机，再长按1秒关机。
4D强度调节，顺时针旋转加强4D按摩强度，反之减弱。
- 暂停键：按下此键后，按摩椅功能停止运行。再按一次解除暂停。
- 加热键：按下此键后，按摩椅开始加热。再按一次解除加热。
- 大师精选自动按摩按键：按下此键后，可进入快速自动按摩。
- 小腿升/降按键：按上半部分键，小腿上升。按下半部分键，小腿下降。
- 背部仰/躺按键：按上半部分键，背部躺下。按下半部分键，背部仰起。
- 腿部伸/缩按键：按左半部分键，膝部伸出。按右半部分键，膝部内缩。
- 脚部伸/缩按键：按左半部分键，脚部伸出。按右半部分键，脚部内缩。

操作说明

1 使用本产品请注意如下事项



- 1. 将电源插头插入插座，将按摩椅后下部电源开关按至“I”的位置。
- 2. 按一下平板右上方开关键开机此时可进行功能选择及操作。
- 3. 按摩结束之后，按开关键关闭整机按摩功能，此时按摩轮、小腿和靠背会恢复到初始位中拔出。


2 主菜单页面



- 1. 主页面 1 为特色自动程序：大师精选、酸痛检测、肩颈放松、脊柱支持。点击直接进入全身按摩。
- 2. 右箭头如图标注 2：点击按键进入主页面2：关节呵护、更多专业按摩、自定义按摩、高级按摩。



- 3. 按左箭头如图标注 3，返回主页面1。
- 4. 右箭头如图标注 4：点击按键进入主页面3：我的收藏。

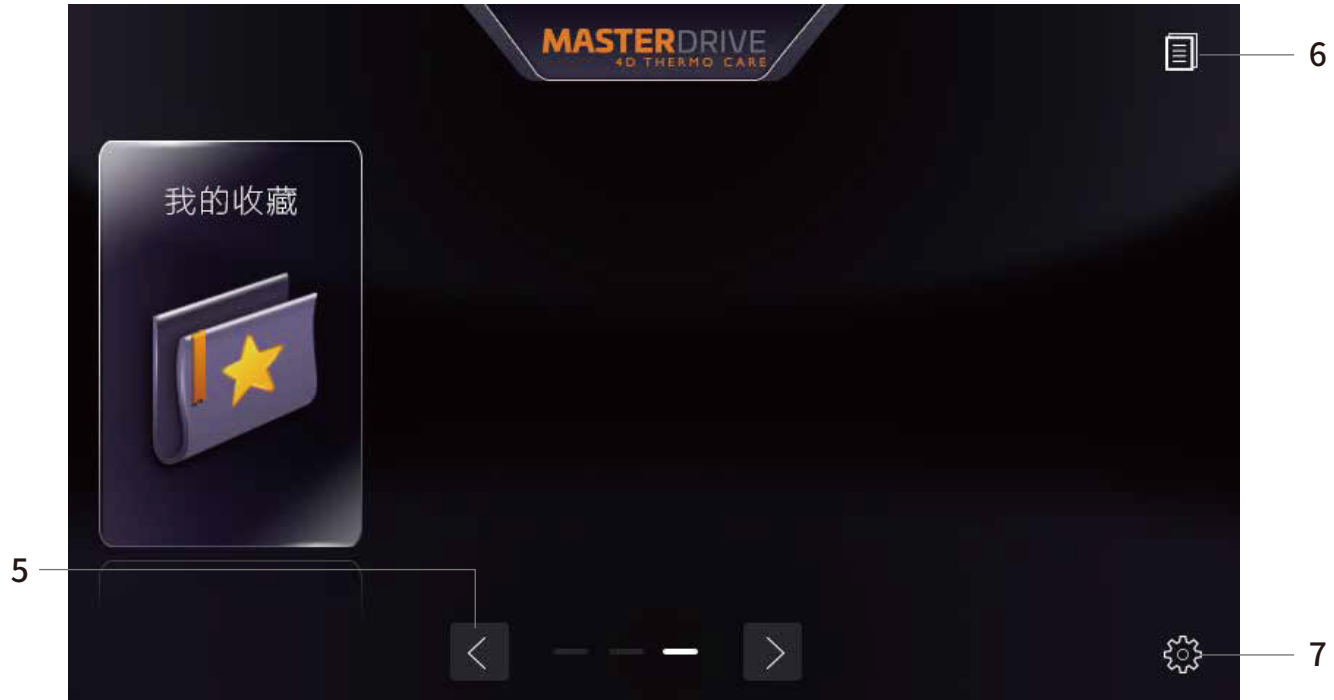

- 5. 按左箭头如图标注 5，返回主页面2。
- 6. 说明书如图标注 6：点击进入，熟悉按摩椅功能定义说明书。
- 7. 设置如图标注 7：点击进入设置页面，此时可对语言、背光、按键音和休眠时间进行设置，设置完成后，可点击左上角按键回到主页面。




3 更多专业按摩



- 1. 专属按摩自动程序：大师精选、肩颈放松、关节呵护、脊柱支持。
- 2. 主题按摩自动程序：久坐族、运动派、低头族、御宅派、驾车族、逛街族。
- 3. 区域按摩自动程序：巴厘式、中式、泰式。
- 4. 功效按摩自动程序：深层按摩、臀部养护、活血循环、元气复苏、运动恢复、平衡身心。
- 5. 场景按摩自动程序：清晨唤醒、午间小憩、睡眠模式。
- 6. 我的收藏：选择已收藏的自动程序进行按摩。

- 7. 点击 7 按钮，进入暂停当前按摩状态，再次点击则继续。
- 8. 点击 8 按钮则返回按摩状态页面。

4 按摩状态

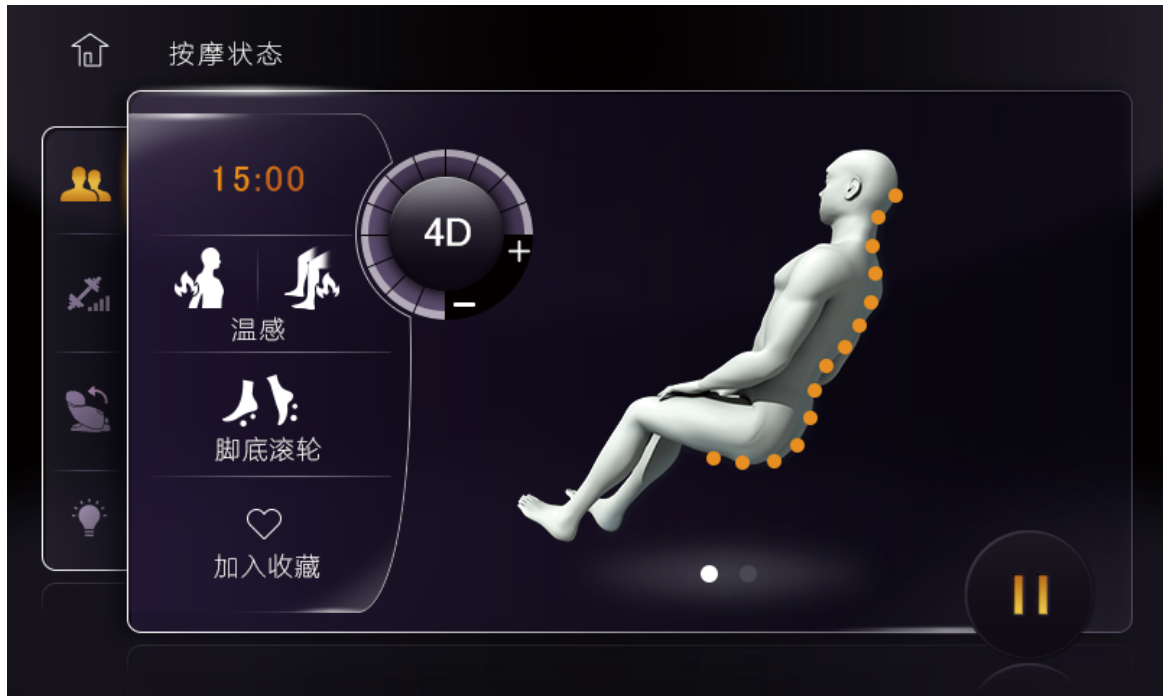

- 1. 酸痛检测功能介绍：点击进入界面后，请将双手掌心自然放置在左右扶手感应器上。先开始肩部检测，检测完成后手控器发出连续的滴滴声表示开始检测背部酸痛点，检测过程请勿将手心离开感应器，否则导致相对应酸痛点位丢失。在检测结束后，手控器会发出两声滴滴声同时手控器界面会出现酸痛点位，不停闪烁。按摩时间按照酸痛点位数量判定。




2. 按摩状态边上5个选项卡分别为1.按摩状态2.力度调节3.坐姿调节4.氛围灯调节5.返回主页。
3. 点击专属、主题、区域、女士、场景，任一个自动程序后进入此页面，此时按摩椅正在对人体进行检测，当检测完成后自动跳转到下一页面。
注意：此页面主要是为了提醒注意正确坐姿，以免影响检测效果。




4. 按摩体型侦测完成后，进入此页面。此时停留在肩部进行揉捏动作，可点击1或2键对肩部高度进行上下微调，或点击3键确认开始按摩
注意：如不进行任何操作，10秒后将自动跳转到按摩状态页面。




- 5.当坐姿不当或无人在按摩椅上时，会弹出此窗口。如是坐姿不当引起，请调整坐姿，并点击“重新检测”，重新开始检测。

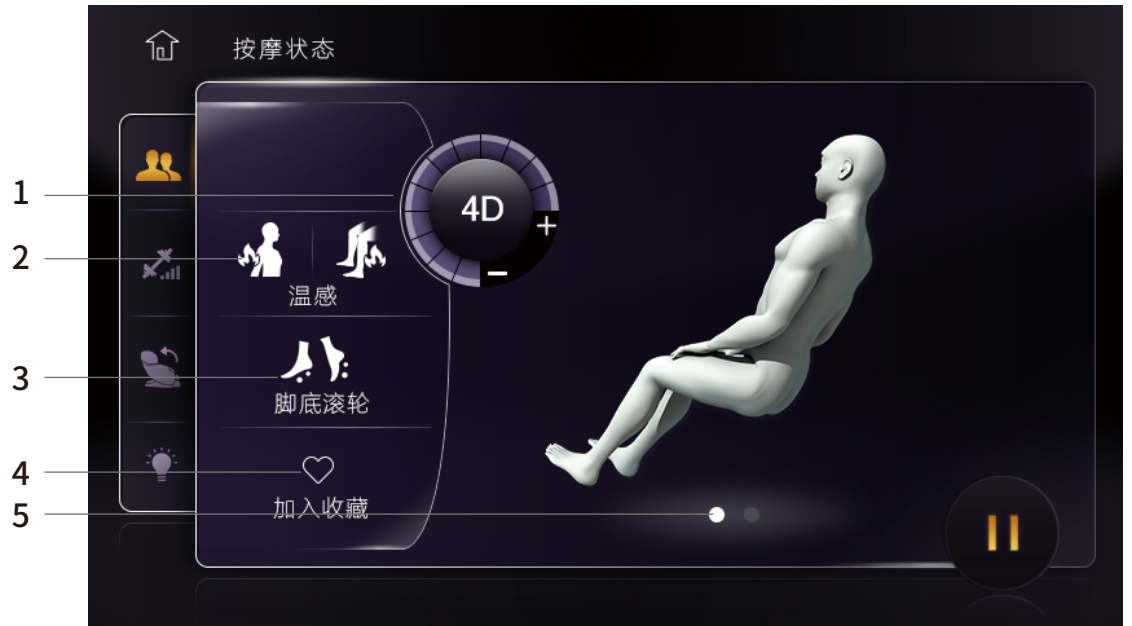

6. 肩部检测完成后将进入按摩状态页面，按摩过程中，可操作如下功能：
7. 按摩4D强度调节如图标注1：点击“-”4D强度减弱，反之，点击“+”4D强度加强。
8. 点击温感图标如图标注2：可开启背部和膝盖温感功能，不需要温感时可再点击一次取消该功能。
9. 点击脚底滚轮图标如图标注3：开启脚底滚轮功能，再点击一次取消该功能。
点击加入收藏图标如图标注4：可把该自动程序收藏起来，下次可直接在主菜单“我的收藏”里选择进行按摩。
10.注：收藏自动程序后，点击同一位置“已收藏”，可取消收藏。
11. 点击人体图标或下面小圆点图示5可切换为以下按摩状态页面。

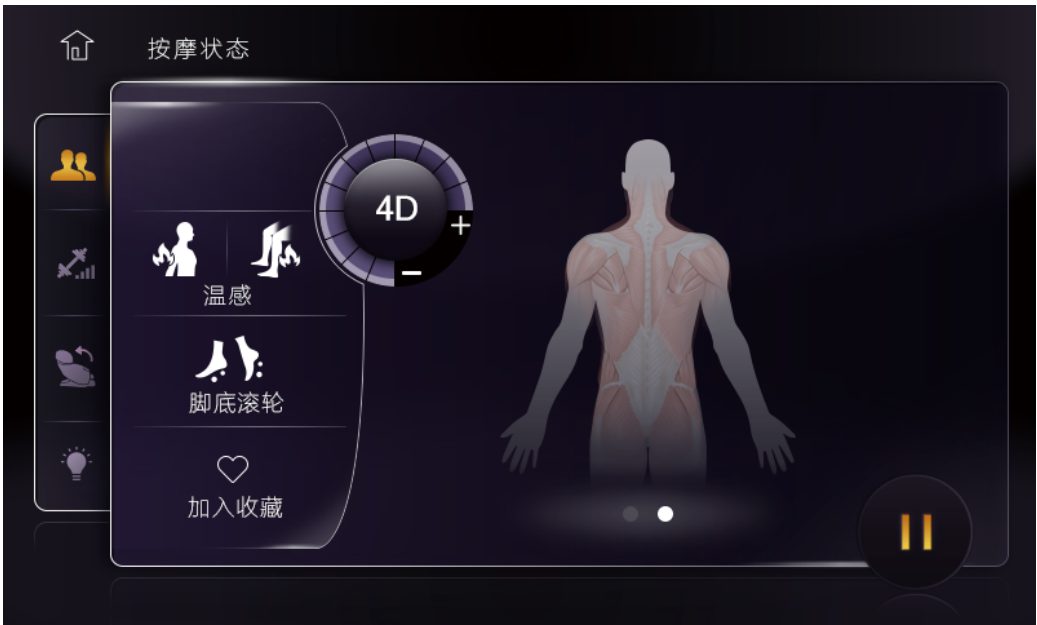

5 调节按摩力度

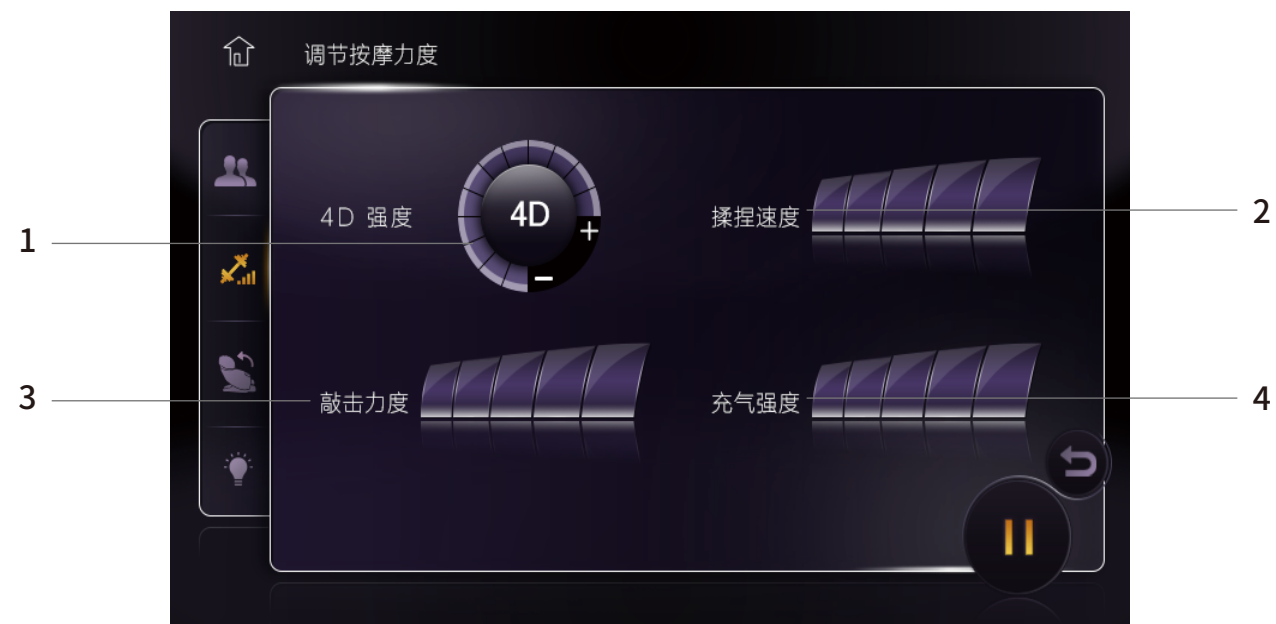

1. 调节按摩力度：4D强度、揉捏速度、敲击力度、充气强度，用户可结合自身舒适度适当调节。
2. 按摩4D强度调节如图标注1：点击“-”4D强度减弱，反之，点击“+”4D强度加强。
3. 揉捏速度如图标注2：5档可调节。
4. 敲击力度如图标注3：5档可调节。
5. 充气强度档如图标注4：5档可调节。

6 调节姿势



1. 调节坐姿：零重力、收纳、展开，一键快捷图标可快速定位。
2. 零重力如图标注1：一键快捷调节至零重力。
3. 收纳、展开功能如图标注2、3：可快速调节符合自身按摩的角度。
4. 靠背角度上下调节如图标注4。
5. 小腿上部上下调节如图标注5。
6. 小腿抬升角度调节如图标注6。
7. 小腿下部上下调节如图标注7。



7 调节氛围灯



1. 调节氛围灯1：点击打开开档位，开机默认为波浪灯光，灯光在不同自动程序显示不同的效果。
2. 波浪氛围灯光2：大师精选、驾车族、中式、臀部养护。
3. 活力围灯光3：肩颈放松、久坐族、泰式。
4. 松弛围灯光4：低头族、巴厘式、深层按摩。
5. 彩虹围灯光5：脊柱支持、逛街族、活血循环。
6. 朦胧围灯光6：御宅派、平衡身心、睡眠模式。
7. 呼吸围灯光7：关节呵护、元气复苏、午间小憩。
8. 唤醒围灯光8：运动派、运动恢复、清晨唤醒。


8 自定义按摩



- 1.自定义按摩图标：点击进入后，颈肩、腰背、臀部、手部、腿部、加热，可选择单一或组合式按摩区域进行按摩，选择后按开始键进入按摩。


9 高级按摩



- 1.高级按摩图标(手动按摩)：点击进入后，有基本手法、气压按摩、特色手法可选择单一或组合式按摩区域进行按摩。
- 2.基本手法如下：**基本手法**
揉捏、指压、瑞典式、敲击、拍打、推拿。
宽度、定点、区间、全背、气压按摩、上调节和下调节按键。
- 3.特殊手法图标有：**特殊手法**
脚底滚轮、腰部滚压、膝盖养护、颈肩4D。
- 4.暂停和返回按键。

按摩结束

1 使脚部按摩收回最初位置。

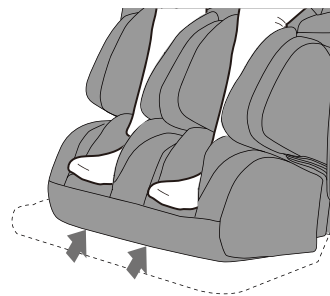

2 将脚从按摩小腿上移开。


为确保安全，使用完毕后，请务必收起小腿。

小腿·脚部按摩的收回方法

- 确认小腿内没有任何物品

慢慢地将腿从按摩小腿上移开。

在调节页，将小腿调回原点。

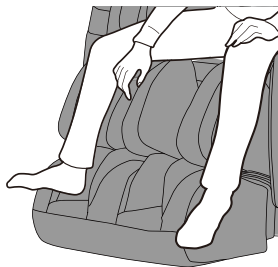


警告


- 儿童禁止使用本机。此外，请勿让儿童在本体上玩耍，或者爬到小腿·脚部按摩部、座面、靠背或扶手上。否则可能会引起事故或造成伤害。



3 将遥控器放回遥控器托架上，并嵌入托架。

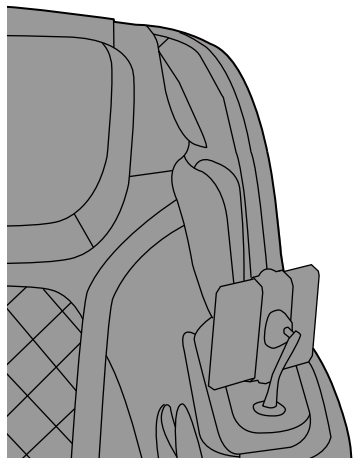


4 切断电源

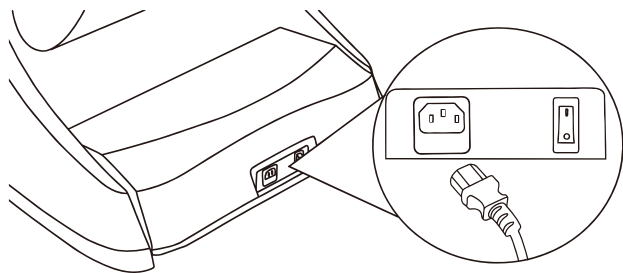

① “关闭”电源开关。

② 拔下电源插头。

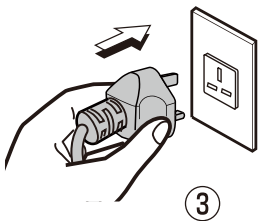

警告

- 每次使用完毕，应将电源开关滑到“0”（关闭）位置，拔掉电源插头。

否则可能因儿童顽皮引发事故或造成伤害。

关于定时器功能

按摩开始后启动定时功能，定时时间到后将自动结束。

- 小腿，脚部按摩部将自动下降。
- 按摩轮将移动到收纳位置。
- 靠背不会自动升起。
如果触摸屏已关闭， 按开关键，靠背小腿收回原始位置。

希望中途停止按摩时

按下  按钮

- 小腿，脚部按摩部自动下降，按摩轮退回到收纳位置。
- 按摩轮收起后，靠背升起。

感觉异常时

按下  按钮



- 所有操作将立即停止。
- 小心走下按摩椅，以防按摩椅翻到。

清洗及保养

清洁合成皮革部分

使用柔软的干布擦拭皮革。

- 切勿使用诸如稀释剂、汽油、酒精等化学品清洁本机。
- 使用市面销售的皮革保养品(抹布)时, 请遵照其使用说明。
- 如果合成皮革特别脏, 则通过以下方式擦拭。
 - ①用液体橄榄皂制肥皂水。将1/4杯液体橄榄皂倒入一碗温水或温度为室温的水中, 摇晃或搅拌来使其起泡。
 - ②用棉布蘸取肥皂水。可以用洗碗布, 也可以用超细纤维布。但不要用海绵之类磨损性质地的布, 否则会刮伤皮革。
 - ③擦拭皮革。遇到结成块的污渍, 要用布以绕圈的方式轻轻擦拭。
 - ④最后用棉布沾清水再擦一遍。这样可以擦去残留的污渍及肥皂, 这一次无需再擦遍皮革的角角落落, 只需擦掉第一次残留下来的污渍就可以了。
 - ⑤然后使其自然晾干;
 - ⑥切记不能使用溶剂型清洗液清洗革面。
- 不要使用吹风机吹干表面。
- 由于布料的颜色会染到合成皮革的表面上, 因此在使用牛仔布和彩色布料擦拭本机时务必小心。
- 不要使这些部位长时间与塑料接触, 因为这会导致褪色。
- 合成皮革有变色的可能, 所以在使用染发剂时, 请将接触的部分用毛巾覆盖。
- 使用过程中禁止与尖锐或较粗糙物体接触, 以防乱伤或蹭伤。
- 避免牛奶、咖啡、果汁等饮料洒到革面上。
- 此皮革为绒感产品, 属高档皮料, 长时间不用要包覆或遮盖起来。

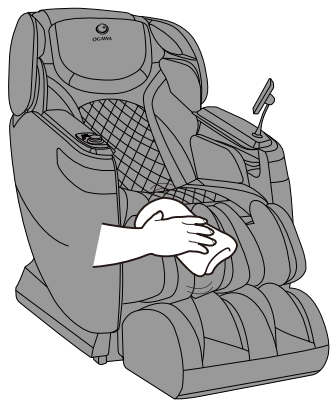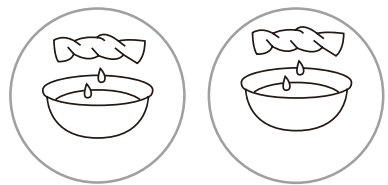


1 将软布浸入水中或含有中性洗涤剂的热水中, 拧干后, 擦拭本机塑料部。

- 切勿使用诸如稀释剂、汽油、酒精等化学品清洁本机。

2 使用浸有清水且已彻底拧干的布料擦拭。

- 擦拭遥控器前请务必拧干布料。

3 使其自然风干。

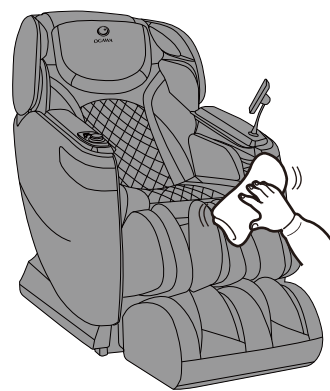

疑问解答(Q&A)

Q 因为生病而经常出入医院的人可以使用本品吗?

A 经常出入医院的人, 请在与医生商量的前提下使用本品。

按摩即所谓“触压刺激”, 即通过对肌肉进行压迫, 缓解肌肉紧张, 促进血液流动。根据不同的病因, 按摩有可能造成病情恶化, 因此请务必在和主治医生商量之后使用本品。

Q 身高多少的人适合使用本品?

A 根据体型的不同多少会有所差异。请大致参考下文使用本品。

- 身高小于145 cm的用户, 及身高超过185 cm的用户同时使用上半身按摩和小腿·脚部按摩时, 可能出现足底与脚部按摩部接触不充分, 或膝盖弯曲的情况。

身高较高的用户感觉膝盖部位弯曲时

请选用下述方法A或方法B

- A 放倒靠背, 降低小腿·脚部按摩部位置。
- B 利用腿置台, 只对上半身进行按摩。
(足部按摩与上半身按摩分开使用)

身高较矮的用户难以向下触到足底按摩部时

请选用下述方法A或方法B

- A 抬起靠背, 升高小腿·脚部按摩部位置。
- B 利用腿置台, 只对上半身进行按摩。
(足部按摩与上半身按摩分开使用)

Q 搬家时, 有什么需要特别注意的地方?


A 请注意以下事项。

- 为了方便搬运, 请先将按摩椅靠背倾斜到最低位置。
- 搬运时, 人不要坐在座椅上。

① 按下开机键, 接通电源。

② 按下  使靠背呈完全倾斜状态。

再按下此按钮
靠背和小腿停此移动。

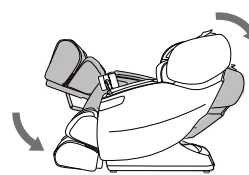


③ 关闭电源开关, 拔出电源插头。

- 在有原装纸箱的情况下, 请先确认电源线未被缠绕在本机上, 将电源线缠好放在座面上; 搬运的时候, 请注意电源线没有掉落且未与地面发生摩擦。
- 在没有原装纸箱的情况下, 为了防止机体划伤和搬运中的震动, 请妥善使用其它包装辅材包裹本品。

Q 请问在哪里可以看到产品的制造编号?

A 在按摩椅主体背面的座面下。

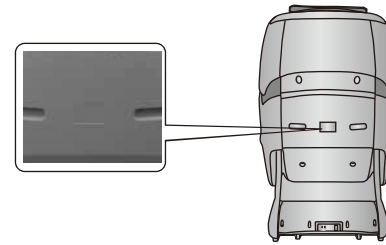

Q 未从膝部感受到温热怎么办?

A 「膝盖温感」只有膝盖部位的布料有温热感。请将膝盖紧贴在温感传递部。脚部按摩部分抬高时, 膝盖与温感传递部紧密接触, 使用户感到温暖。另外, 用户可以通过用毛毯盖住膝盖, 增加温暖感。

Q 有点在意按摩椅运作时发出的声音……

A 按摩椅运作时产生的声音, 一般是由于机芯构造而发出的。

Q 按摩中感觉左右两边按摩轮的按摩力度有差异, 要紧吗?

A 由于机芯构造, 在按摩过程中, 确有可能感觉左右按摩轮的力度有差异。

为了能够模拟出最自然的按摩手法, 本品机芯采用了允许左右按摩轮交替捶背的机芯构造。在按摩过程中, 左右按摩轮接触背部的位置可能稍有差异, 从而导致了使用者产生左右两侧按摩力度有所不同的感觉。此时, 本品本身并未发生故障。

Q 感到足底指压过于用力……

A 使用气囊按钮将气囊强度设置为“1”。另外, 降低小腿·脚部按摩部, 也可以减轻足底的指压力度。

Q 使用本品时每个月耗电量是多少?


A 按每日30分钟, 使用频率来计算, 每月本品耗电量约为2.5度。

发现故障后，首先检查并尝试以下方法。
如果在尝试后，故障依然存在，请联系销售店。


问 题	原因和解决方法
在使用本机过程中按摩轮停止 （按摩椅发出“哔哔哔”的声音，遥控器上所有的显示图标和按钮闪烁然后熄灭）	<p>在使用过程中，按摩轮遇到过大的外力时，出于安全考虑，按摩轮可能会停止移动。</p> <p>如果遥控器上的所有标记和按钮开始闪烁，这种情况极为异常，请关闭电源开关，等待约10秒钟，然后再次打开电源。 如果按摩轮再次停止，请调整自己的坐姿，不要使背部完全贴在靠背上。（应注意遵守相关注意事项，尤其在体重为100 kg或以上的人使用时。）</p>
不能倾斜 小腿不能升高降低 （发出“哔哔哔”的声音，遥控器的运行指示灯熄灭并停止运行）	<p>如果本机遇到了障碍物或者在使用本机时用力过大，出于安全考虑，本机将停止工作。</p> <p>当所有显示的内容及按钮在闪烁时，且靠背或小腿已停止工作，关闭本机电源一次，约10秒钟后再次打“开启”电源，然后操作本机。</p>
按摩轮没有达到肩部或颈部的位置	<p>如果头部没有接触到靠枕，或背部没有接触到靠背，在体型检测过程中肩部位置可能低于实际位置。坐在座椅的最深位置，将头部靠在靠枕上，然后从头开始重新操作。</p>
左右按摩轮的高度（强度）不同	<p>因为搭载了可进行按摩轮交互捶拍动作的按摩机芯，出现这种情况纯属自然。并非机体故障。</p>
本机根本无法运行 ●上半身（颈部至腰部）按摩 ●小腿和脚部按摩	<ul style="list-style-type: none">● 电源线连接已断开。● 没有打开本机电源开关。● 按下遥控器上的 开机键 按钮后，没有选择任何程序。
按摩轮和膝盖温感都没有温热感	<ul style="list-style-type: none">● 按摩轮和膝盖温感按钮被设定为关闭状态。● 膝部温感只有膝盖部位的布料有温热感。 温感的感知程度根据用户的体型，按摩手法，衣服，室温而有所不同。脚部按摩部分抬高时，膝盖与温感传递部紧密接触，使用户感到温暖。另外，用户可以通过用毛毯盖住膝盖，增加温暖感。
即使关闭温热功能，温度也将不下来	<ul style="list-style-type: none">● 由于加热器的结构，加热后片刻依然会因为余热而感到温暖。● 即使关闭温热功能，持续按摩同一部位，也会使体感温度上升。
即使按下按摩轮和膝部温感，加热器也不发热	<p>如果上半身按摩或膝盖按摩部都没有加热，温热功能无法单独使用。</p>
本机已受损	
电源线或电源插头异常发热	<p>为防止事故发生，请务必与授权服务中心联系。</p>

若以上处理方法无效，请参阅《产品保修单》，联系OGAWA服务中心。

关于运行过程中本机发出的声音和令人在意的感觉	
<p>在使用中会发生下述动作音、感觉，不过这是因按摩椅的结构而发生的，并非异常。</p> <ul style="list-style-type: none">● 按摩轮由“伸出”改为“收回”时的声音● 动作时按摩轮擦过面料上的皱纹时发出的声音和感觉● 揉按、捶拍动作等的动作音● 按摩轮动作时的摩擦声● 上下动作时的动作音● 传送带的转动音● 电机音● 按摩轮从“挤压”改为“拉伸”时的声音● 落座时的声音● 靠背倾斜时扶手与靠垫的摩擦声● 按摩轮与布料的摩擦声● 气囊按摩运作时的充气泵工作音● 气囊按摩运作时的排气音● 气囊按摩运作时座椅下电磁阀发出的工作音● 腿置台的晃动● 肩部伸展、动作时的声音● 气囊的动作音● 脚部按摩部的滑动音● 靠背倾斜时，靠垫与后盖皮革摩擦时发出的声音 <p>当声音变大时，也有可能发生了故障。</p> <ul style="list-style-type: none">● 此时，请委托授权服务中心进行检查和修理	

**警告**

- 请勿擅自改造本机。请勿自行分解或修理本机。否则可能导致起火、异常动作、人身伤害。

**警告**

- 发生异常、故障时，立即停止使用，拔掉电源插头。（否则可能冒烟、起火、触电）
＜异常、故障事例＞
 - 接通电源开关后可能不动作
 - 移动电源线，有时通电有时不通电
 - 运行中发出焦臭味、异常声响
 - 按摩椅变形或者异常发热→ 请立即委托授权服务中心检查和修理。

规格

电 源		AC220V, 50Hz
消 耗 电 力		200W (用遥控器“关闭”时大约0.3 W)
上半身按摩	可按摩范围 (上下方向)	约1.35m
	可按摩范围 (左右方向)	在使用本机过程中按摩轮间的距离(包括按摩轮的宽度) 背部滚动和上下移动过程中按摩轮间的距离(包括按摩轮的宽度): 约 5cm ~ 19cm
	可按摩范围 (前后方向)	按摩轮的突出量(强度可调节) 约10cm
	按摩速度	揉按 约19次/分钟~约36次/分钟 捶拍 约 242次/分钟~约720次/分钟(单侧) 移动速度 约2.5厘米/秒~约3.5厘米/秒
倾 斜 角 度		靠背: 约 128° ~ 154° 小腿按摩部分: 约 4° ~ 86°
自 动 关 闭		约15分钟 (自动断电)
尺寸	未倾斜时 (长×宽×高)	约158cm X 84cm X 121cm
	倾 斜 时 (长×宽×高)	约196cm X 84cm X 105cm
重 量		约125kg
包 装 箱 尺 寸 (长×宽×高)		3箱包装 座部:146.5×77×102cm 侧板:127x37x66cm 小腿:57x49x60cm
重量(含包装箱)		3箱包装:约148.3kg
用 户 最 大 体 重		约100kg

对于体重100 kg 或以上的人士，产品运作时可能产生更大的噪声而且面料外罩可能磨损得更快。

联系我们

奥佳华品牌营销有限公司
地址：厦门市思明区前埔路 168 号三楼 01 单元(西侧)
服务热线：400-885-9880